


Medical Device Depot
Inc.

www.medicaldevice depot.com
1-877-646-3300

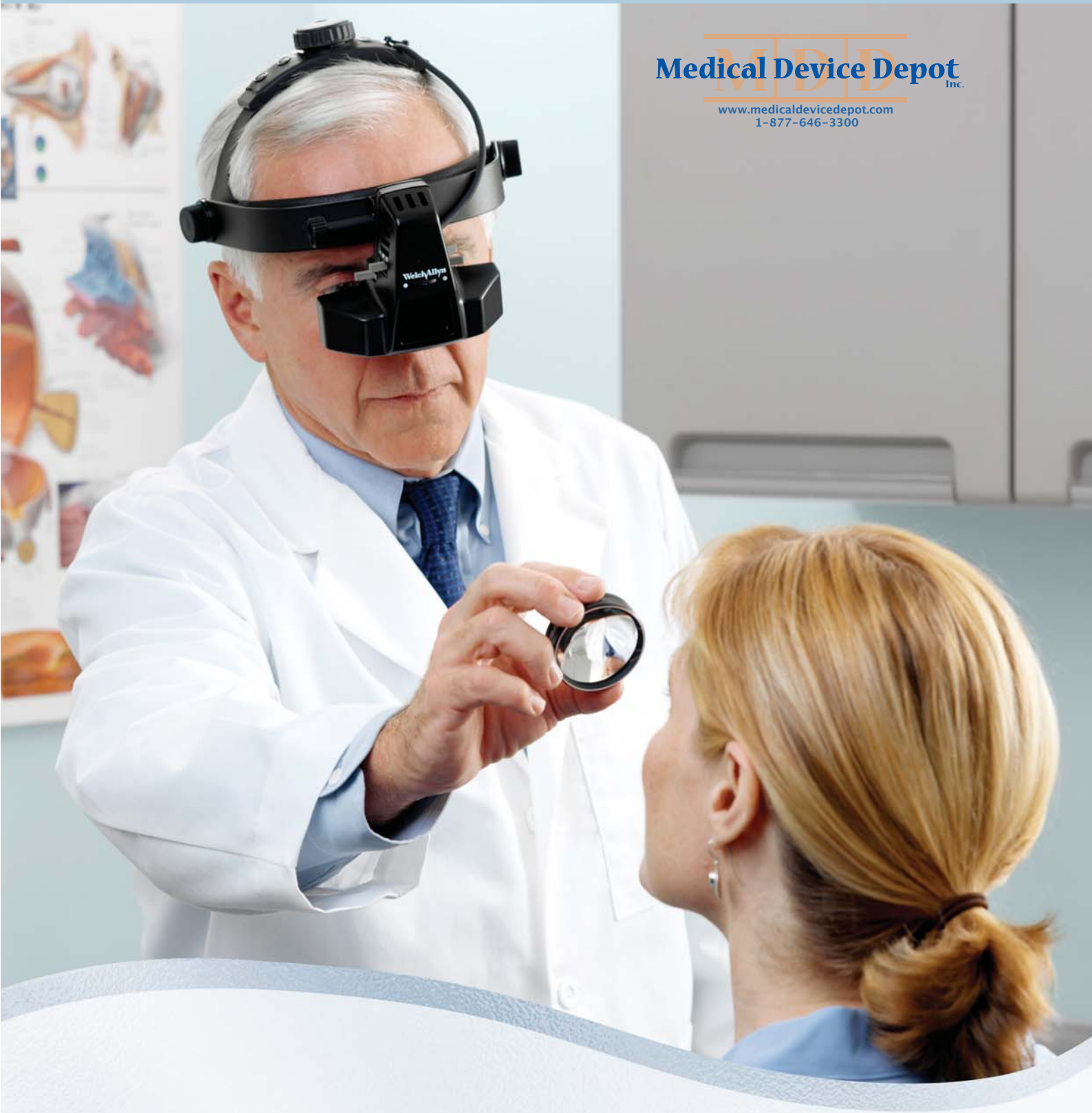

El Oftalmoscopio Indirecto Binocular 125 de Welch Allyn
El primero de una línea superior de instrumentos de oftalmología

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care[™]

Un oftalmoscopio indirecto como nunca se había visto

El BIO 125 de Welch Allyn ha sido diseñado para obtener una visión binocular y estereopsia precisa y con más facilidad que nunca. Su línea de observación se pueden ajustar de 48 mm a 75 mm para distancias interpupilares más anchas y más estrechas. Sus demás funciones avanzadas simplifican todavía más el uso y le ofrecen imágenes retinianas inigualables.



- Modo de pupila grande
- Modo de pupila pequeña



Modo de pupila grande



Modo de pupila pequeña

Control de convergencia para pupilas pequeñas

Ocurre a menudo que la pupila de un paciente no se dilata, incluso con la ayuda de gotas midriáticas. El control de la convergencia del BIO 125 de Welch Allyn permite la proyección del haz de iluminación y de la línea de observación incluso en las pupilas más pequeñas. Así se puede examinar a los pacientes con pupilas de menos de 2 mm de tamaño.

Filtro difusor para una mejor visión periférica de la retina.

El filtro difusor del BIO 125 de Welch Allyn expande el haz de iluminación y mejora la visión de las zonas periféricas de la retina.

Al ampliar el campo visual, el filtro difusor reduce la cantidad de maniobra necesaria para lograr la alineación óptica. A su vez, esto mejora la estabilidad de la imagen y evita cortar la misma.

El filtro difusor reduce automáticamente la intensidad de la iluminación. Así se evita la miosis de la pupila, común entre personas de ojos muy sensibles.



Difusor activado



Difusor no activado



Un diseño que hace que todo parezca fácil.

El Oftalmoscopio Indirecto Binocular 125 de Welch Allyn tiene las prestaciones más avanzadas de cualquier BIO. Su diseño práctico y cómodo promete establecer las pautas para una comodidad y un desempeño inigualables.

10 años Garantía en la Óptica

La Óptica del BIO 125 de Welch Allyn viene con una garantía exclusiva de 10 años.



Pendiente la patente estadounidense N° 5.394.201 y las patentes internacionales

Partes ópticas videoalineadas

El sistema óptico del BIO 125 de Welch Allyn se alinea mediante un avanzado sistema de alineación que garantiza que todos los elementos tengan la orientación precisa necesaria para ver con exactitud. La alineación óptica precisa previene el cansancio de los ojos y optimiza el desempeño del BIO.

Diseño cómodo, equilibrado

Diseñado para la máxima comodidad y el rendimiento del usuario. La forma de la banda para la cabeza es ergonómica, sigue el contorno de la cabeza y mejora la estabilidad. El sistema encaja mejor y es más cómodo y natural que el de cualquier otro BIO. Las partes ópticas son pequeñas y livianas, por lo que usted notará un equilibrio aún mejor cuando lo use.

Servicio duradero

El sistema de iluminación halógena que se usa en el BIO 125 de Welch Allyn dura más que cualquier otra fuente de iluminación de un BIO. Es más: el sistema óptico está sellado internamente para proteger el sistema óptico vital, los conjuntos de espejos y los armazones del polvo, la suciedad y las roturas accidentales.

Diversas Fuentes de Alimentación

Fuente de alimentación de pared/sobremesa

Fuente de alimentación versátil y multiusos. Puede usarse sobre la mesa, sujeta en el borde de la misma o en la pared. Activa y conserva el BIO en diversas configuraciones. Además, facilita el almacenamiento de las lentes de condensación.

Fuente de alimentación portátil

Con ella, se pueden efectuar los exámenes en cualquier lugar. Suministra casi una hora de funcionamiento continuo y el instrumento se puede utilizar incluso cuando está cargándose. Un indicador de luz indica que el aparato está conectado a la red, que su nivel es bajo o que está recargándose. El reóstato es de fácil acceso y, gracias a una pinza, muy portátil.

Accesorios principales

Espejo para los instructores

Fácil de montar en el BIO. Permite a dos observadores obtener una imagen clara. Se puede retirar con facilidad de la línea de visión del usuario.

Maletín

Este robusto maletín ofrece la máxima protección al aparato y sus accesorios y contiene un set de diagnóstico de Welch Allyn. Tiene asas, una bandolera, un bolsillo para esquemas de fundus y espacio para las fuentes de alimentación.

Información para pedidos

12500	BIO con filtro azul cobalto (parte óptica, banda para la cabeza, cable de 2,7 m)
12500-D	BIO con filtro azul cobalto y filtro difusor (parte óptica, banda para la cabeza, cable de 2,7 m)
12500-Y	BIO con filtro amarillo en vez de filtro azul cobalto (parte óptica, banda para la cabeza, cable 2,7 m)
12500-DY	BIO con filtro difusor y filtro amarillo en vez de filtro azul cobalto (parte óptica, banda para la cabeza, cable de 2,7 m)
73300	Cabel extensión para BIO de 1,3 m
12550	Espejo para los instructores
12551	Adaptador de voltaje, 4,5 V
12060	Depresor escleral (tipo dedal, mediano)
01200-U	Bombilla de recambio
05122-U	Maletín (pequeño)
05120-U	Maletín (grande)
50120	Esquemas de fundus y lápices
72240	Batería de recambio
74352	Fuente de alimentación de pared/mesa
74362	Fuente de alimentación portátil



74352



74362



05120-U



05122-U



12550

Medical Device Depot Inc.

www.medicaldevicedepot.com
1-877-646-3300